


SURFA'SAFE Premium

Mousse détergente
désinfectante des
surfaces et des
dispositifs médicaux

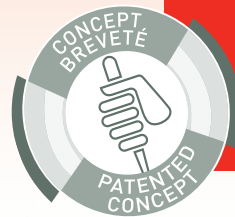

- Concept brevetée
- Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus ...dès 3 min.
- Large compatibilité avec les matériaux

INDICATIONS

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexe...)

CARACTERISTIQUES

- Nettoyant et désinfectant en 1 seule opération
- Sans substance CMR, sans alcool, sans parfum ni colorant
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé)
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas ...)
- Séchage des surfaces rapide et sans trace
- Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, suivi d'un rinçage
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de GES* de 7% par rapport à un produit de même application
- pH : 6 +/- 0.5

* Gaz à Effets de Serre

PRÊT A
L'EMPLOI



SURFA'SAFE Premium

Mousse détergente désinfectante des surfaces et des dispositifs médicaux

MODE D'EMPLOI




1

Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface ou de préférence sur un non-tissé propre et sec.



2

Bien répartir la mousse sur la surface à traiter (+/- 6ml/m² soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué selon l'activité microbienne recherchée.

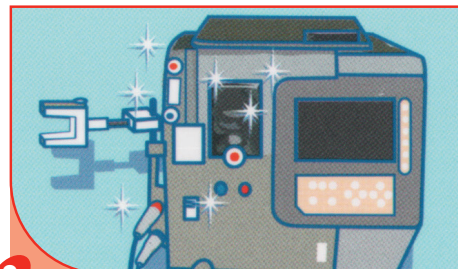

3

Laisser sécher. Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses).

COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) - usage réservé aux professionnels. Dispositif médical de la classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENTS

1 12 flacons de 750 ml avec distributeur de mousse diffuse.....2419.326

2 12 flacons de 750 ml avec distributeur de mousse.....2419.544

Existe en version solution non moussante :

3 16 flacons pissette de 500 ml.....2419.105

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561	3 minutes
	EN 13727 sur ERV, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM	1 minute
	EN 13697 sur ERV, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM	2 minutes
Levures	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	5 minutes
Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	20 minutes
Virus	Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus*, BVDV	1 minute
	Polyomavirus SV40	5 minutes

* Le Robert Koch Institute recommande l'utilisation de désinfectants avec la revendication "begrenzt viruzid wirksan", soit activité virucide limitée, pour interrompre la chaîne de transmission. Selon cet Institut, l'activité virucide limitée correspond à une activité sur virus de la vaccine et BVDV



SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant
sols et surfaces



- Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée
- Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier
- Produit formulé sans aldéhyde
- Optimisation des données écotoxicologiques

PRODUIT À DILUER
20 ml > 8 L



0,25%

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels médical. Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.


CARACTÉRISTIQUES

- Solution de couleur verte
- pH du produit pur : 11,2
- pH du produit dilué (0,25%) : environ 8
- Densité : 1,007
- Indice de Réfraction : 1,3587


SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant sols et surfaces

MODE D'EMPLOI

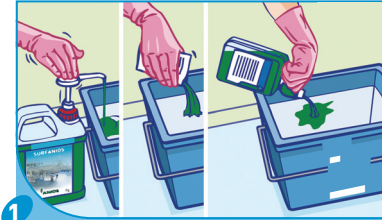

1 Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. **Dilution à 0,25%** : Verser une dose de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM dans le seau de lavage.

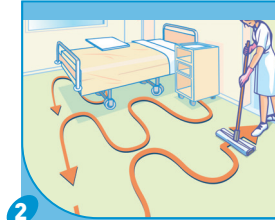

2 Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.



3 Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



4 Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25mg/g), excipients.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux – respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4). Usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENTS

SURFANIOS Premium

- 1 500 sachets de 20 ml.....Ref. 1917.129
- 2 12 flacons doseurs de 1 litre.....Ref. 1917.092
- 3 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 ml.....Ref. 1917.036

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 1276, EN 13727	5 minutes
	BMR (EN 1276)	5 minutes
	EN 13697	30 minutes
	BMR (EN 13697)	15 minutes
Mycobactéries	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	30 minutes/0.5%
	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	60 minutes/0.25%
Levures	EN 1275, EN 1650	15 minutes
	EN 13697	30 minutes
Moississures	EN 1275	15 minutes
	EN 13697	30 minutes
	EN 1650	120 minutes
Virus	Selon EN 14476 HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle HCV) et Herpès virus	5 minutes
	Vaccinavirus	60 minutes





CLEANISEPT® WIPES

*Lingettes sans alcool
pour une désinfection rapide*

maxi

- ✓ sans alcool
- ✓ sans aldéhyde
- ✓ sans phénol
- ✓ testées dermatologiquement



- Lingettes sans alcool pour la désinfection de dispositifs médicaux sensibles tels que : sondes à ultrasons ; moniteurs, optiques, mobilier d'examen, équipements sensibles etc....
- Effet rapide, y compris sur : PAPILLOMA virus et POLYOMA virus
- Matériau doux et non-pelucheux particulièrement adapté au matériel médical

Testé et approuvé pour la désinfection des dispositifs médicaux et sondes d'échographie des fabricants suivants :

TOSHIBA | SIEMENS | PHILIPS | SHIMADZU | SONOACE | ALOKA

NOUVEAU

maxi

**Dimensions
de la lingette: 20 x 22 cm !**

CE 0482



TYPE DE PRODUIT

Lingettes de désinfection sans alcool prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide et le nettoyage de matériel médical et surfaces de tous types. Utilisées également dans tous les domaines de la transformation des denrées alimentaires et cuisines industrielles. Les **CLEANISEPT® WIPES MAXI** au format 20 x 22 cm sont pratiques à extraire grâce à un système de distribution Pop-up. Elles conviennent particulièrement pour les équipements médicaux sensibles à l'alcool, comme par exemple les têtes de sondes pour échographies abdominales et vaginales. A base de composés d'ammonium quaternaire modernes, Les **CLEANISEPT® WIPES MAXI** sont sans alcool et ne contiennent ni aldéhyde, ni phénol. Grâce à la haute qualité du matériau non pelucheux (100 % PES) et à la restitution garantie de la substance active, les **CLEANISEPT® WIPES MAXI** conviennent particulièrement pour toutes les applications professionnelles.

Une très faible toxicité avec un grand pouvoir nettoyant et désinfectant.

Les **CLEANISEPT® WIPES MAXI** sont fabriquées pour un usage sur les appareils à ultrasons Philips, Shimadzu, SonoAce, Aloka, GE, Toshiba et Siemens.

Les **CLEANISEPT® WIPES MAXI** répondent aux spécifications légales en matière de sécurité du travail selon les recommandations du TRGS 525/540.

DOMAINES D'APPLICATION

D'après la norme ce medical et la loi sur les produits médicaux MDD (Medical Device Directive) : désinfection rapide et nettoyage de produits médicaux sensibles comme les têtes à ultrasons de sondes d'échographies pour examens vaginaux et abdominaux.

D'après la Directive sur les produits biocides : désinfection rapide et nettoyage de matériel médical sensible à l'alcool et de surfaces de tous types. Egalement dans tous les domaines de la transformation des denrées alimentaires et cuisines industrielles.

UTILISATION

Nettoyer les surfaces et objets jusqu'à humidification complète. Après avoir laissé agir, essuyer le cas échéant avec une lingette jetable. En cas d'utilisation sur des têtes de sondes à ultrasons, il est recommandé d'essuyer une fois par jour avec une lingette jetable plongée dans de l'eau microbiologiquement pure. Il est essentiel de veiller ici à désinfecter la sonde à ultrasons avant chaque utilisation avec **CLEANISEPT® WIPES MAXI**.

Les **CLEANISEPT® WIPES MAXI** se prélèvent une par une et sont prêtes à l'emploi. Le couvercle doté d'un système pop-up permet de les extraire rapidement et facilement. Après prélèvement, refermer le couvercle Pop-Up.

SPECTRE D'ACTION

Les données se rapportent au liquide **CLEANISEPT® WIPES LIQUID**

- bactéricide (y compris : staphylocoque doré multirésistant – MRSA)
- fongicide (C. albicans), levurocide
- virucide sur (HBV, HIV, HCV, rotavirus, papova / Polyoma et vaccinia virus)

DELAI D'ACTION

Les données se rapportent au liquide **CLEANISEPT® WIPES LIQUID**

Bactéricide y compris MRSA, fongicide (C. albicans)/ levurocide selon l'organisme allemand DGHM/VAH/EN 13697
tps d'exp. 1 mn

Actif contre tous les virus enveloppés y compris HBV/HIV/ HCV/vaccine/BVDV/virus de l'influenza et grippaux selon la recommandation d'hygiène RKI)
tps d'exp. 30 s

Rotavirus
tps d'exp. 30 s

Papova / Polyoma virus
tps d'exp. 2 mn



DR. SCHUMACHER GMBH
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM

CLEANISEPT® WIPES *maxi*

COMPOSITION

100g **CLEANISEPT® WIPES LIQUID** contiennent :
0,25g chlorure de dialkyl-deméthyl-ammonium
0,5g chlorure de n-alkyl-benzyl-ammonium

Contenu : un pack contient 80 chiffonnettes à 20x22cm, imbibé de 440g de solution Cleanisept Wipes Liquid

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Les données se réfèrent sur le liquide Cleanisept Wipes Liquid
Forme/couleur : solution claire, incolore
Valeur ph : 6-8

UNITÉS DE LIVRAISON

Unité seul	unité de vente	n° d'article
Boîte avec 80 feuilles (20 x 22 cm)	12 x 80 chiffonnettes	00-208-To80

REMARQUES PARTICULIÈRES

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau aussi sous les paupières.

Utiliser l'agent de désinfection de manière sûre. Avant l'emploi, toujours lire la plaque signalétique et la fiche d'information sur le produit.

ATTESTATIONS

Prof. Dr. Schubert, Hygiéniste, Francfort/Main : attestation sur la désinfection des surfaces selon DGHM/VAH

Prof. Werner, Hygiéniste, Bischofshofen : attestation sur la désinfection des surfaces selon DGHM/VAH

Dr. Steinmann, Virologue, Brême : attestation efficacité sur le rota virus, sur le vaccinia virus, sur BVDV (HCV) et sur le papova/polyoma virus.

Sté. Siemens Medical Solutions : autorisation pour l'utilisation de **CLEANISEPT® WIPES MAXI** sur des échographes Siemens

Sté Philips Medizin Systeme GmbH : autorisation pour l'utilisation de **CLEANISEPT® WIPES MAXI** sur des échographes Phillips

Sté. Schmitz&Söhne, Wickede : autorisation pour l'utilisation de **CLEANISEPT® WIPES MAXI** sur du mobilier médical ainsi que sur des revêtements en matière plastique souple de la société Schmitz&Söhne (Divans, Fauteuils d'examen etc....)

Sté Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg : autorisation pour l'utilisation de **CLEANISEPT® WIPES MAXI** sur des sondes d'échographie de la société Shimadzu

Bioscientia, Dr. M. Geissler, Mainz : Examen microbiologique de **CLEANISEPT® WIPES MAXI** par Bioscientia en test pratique à la clinique Miltenberg-Erlenberg

SonoAce GmbH, Marl : autorisation pour l'utilisation de Cleanisept Wipes sur des appareils et sondes de la société SonoAce GmbH

Derma Consult GmbH, Alfter : **CLEANISEPT® WIPES** – Expertise dermatologique

Aloka GmbH, Meerbusch : autorisation pour l'utilisation de Cleanisept Wipes sur des appareils et sondes de la société Aloka GmbH

Karl Storz GmbH&Co KG, Tuttlingen : autorisation à l'utilisation de **CLEANISEPT® WIPES** sur des moniteurs de la société Karl Storz GmbH&Co KG.

Autorisation à l'utilisation de **CLEANISEPT® WIPES** sur des optiques rigides à baguettes

TOMEY/Eye Novation GmbH, Bielefeld : autorisation à l'utilisation de **CLEANISEPT® WIPES** sur des sondes Bio et Packy de Tomey.

Cardinal Health, Allemagne : autorisation à la désinfection des appareils Master Screen de la société Cardinal Health

ENREGISTREMENT

Le liquide **CLEANISEPT® WIPES LIQUID** est enregistré sur la liste actuelle des agents désinfectants de DGHM/VAH et ÖGHMP.

Enregistré sur la liste actuelle des agents désinfectants utilisés dans le domaine de transformation des aliments de la DVG (société allemande de la médecine vétérinaire)

Enregistré sur la liste de IHO virucide (www.iho-viruzidie-liste.de).

Enregistré comme produit biocide par la BAUA (Institut fédéral de la protection et de la médecine du travail) selon la loi sur biocide : BAUA n° d'enreg. : N-39369 et N-39370.

Enregistré comme produit médical selon directive européenne 93/42 EWG. Correspond à la directive 93/62/EG pour des produits médicales.

INFORMATIONS CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les produits de la société Dr. Schumacher GmbH sont fabriqués selon des procédés modernes, sûrs et écologiques. En respectant un haut niveau de qualité la société garantit une très bonne qualité constante des produits. La société est certifiée selon DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 et dispose d'un système de management de l'environnement, validé selon EMAS.

Importé en France par la sté :



THX MEDICAL
125, impasse du belvedere
69280 MARCY L'ETOILE
Tel: ++33(0)4 78 87 17 99
Info@thxmedical.com



DR. SCHUMACHER GMBH
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM